

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE

Van Raam Fun2Go -rinnakkain poljettava pyörä

Van Raam Fun2Go on sähköavusteinen rinnakkain poljettava pyörä. Istuimien etäisyys ja ohjaustankojen korkeus on säädettävissä. Pyörän hallintalaitteet on sijoitettu avustajan ohjaustankoon. Avustettavan pyöräilijän ohjaustanko on kiinteä.

Avustettavan pyöräilijän polkimien liike on mahdollista säätää joko itsenäiseksi, täysin vapaaksi tai pakottavaksi. Kummankin pyöräilijän maksimipaino on 120 kg.



Haaramitta	75–90 cm
Pyöräilijän maksimipaino	120 kg

Pyörän mitat	
Pituus	195 cm
Leveys	104 cm
Korkeus	120 cm
Istuinkorkeus	58 cm
Paino	100 kg

Käyttöönotto

Pyörän mukana toimitetaan verkkovirtaan kytkettävä laturi. Laturissa on merkkivalot latauksen edistymisen seuraamiseksi. Punainen valo palaa latauksen aikana ja vaihtuu vihreäksi akun tullessa täyteen.

Latauspistoke

Latauspistoke on pyörän takaosassa, tavarakorin vieressä.



Ohjaustankojen säädöt

Avaa kuvan kuusiokoloruuvi (6 mm) säätääksesi ohjaustankojen kulmaa. Säädä sopiva asento ja kiristä ruuvi. Ruuvi on kiristettävä melko voimakkaasti, jotta tanko on tukeva.



Avaa kuvan kuusiokoloruuvi (6 mm) ohjaustangon keskeltä muuttaaksesi ohjaustangon korkeutta. Avaa ruuvi ja säädä sopiva korkeus. Varmista, että tanko on suorassa ja kiristä ruuvi.




Istuimen etäisyys

Nosta kuvaan merkitystä kahvasta istuimen alta säätääksesi istuimen etäisyyttä. Nosta kahvaa ja siirrä istuinta samanaikaisesti eteen tai taakse. Vapauta kahva, niin istuin lukittuu tilaansa.



Avustettavan istuimen selkänojan kulma

Avaa kuvan kahvasta selkänojan lukitus ja säädä selkänojaan sopiva kulma. Kiristä lukitus.

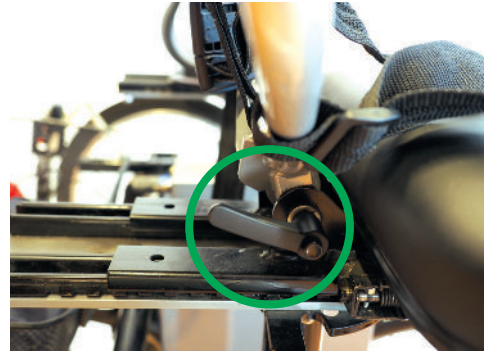

Jalkatuet

Jalkatuissa on kiristys kahdella remmillä ja pieni kaukalo kantapäälle.




Turvavyö

Avustettavan pyöräilijän istuimessa on pistolukollinen turvavyö. Kiristä turvavyö sopivan mittaiseksi.



Seisontajarru

Lukitse seisontajarru kääntämällä kuvan harmaa kahva alas. Kahva on avustajan ohjaustangon keskiosassa.

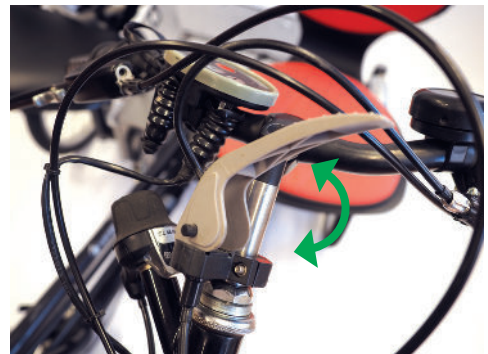

Manuaalivaihteet

Manuaalivaihteita käytetään avustajan ohjaustangon vasemmasta kahvasta. Lopeta polkeminen ja kierrä kahvaa vaihtaaksesi vaihteita (1–8). Manuaalivaihteet eivät vaikuta avustettavan pyöräilijän polkimiin.



Tandem on varustettu akkukäyttöisellä apumootorilla. Apumootoria käytetään ohjaustangon kaasukahvasta, pyörää on kuitenkin poljettava samanaikaisesti.

Avustimen ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin alaosan palkki näyttää akun varauksen (vihreä = täynnä). Numeronäppäimistä säädetään apumootorin voima. Avustin käynnistetään punaisesta näppäimestä.



Polkimien asetuksen valinta

Polkimien asetus valitaan avustajan ohjaustangon alaosassa olevasta kytkimestä. Käännä kytkintä vaihtaaksesi asetusta (1–3).



Avustettavan pyöräilijän polkimille on valittavissa kolme asetusta.

- #1 Avustettavan pyöräilijän polkimet ovat vapaalla ja pyörivät tyhjä.
- #2 Kumpikin pyöräilijä voi polkea. Kumpikin pyöräilijä voi myös levätä välillä toisen jatkaessa.
- #3 Kumpikin pyöräilijä voi polkea, mutta polkeminen pakottaa toisetkin polkimet liikkeeseen.

! Kolmatta toimintoa voidaan käyttää polkemisliikkeen opetteluun ja terapiakäytössä siirtämään liikettä avustettavan jalkoihin. Tarkkaile tällöin, että avustettavan polkemisliike säilyy hallittuna ja pidä pyöräilynopeus riittävän alhaisena. Älä polje väkisin.

Sähköavustimessa on myös toiminto helpottamaan liikkeellelähtöä. Kaasukahvaa kääntämällä avustin käynnistyy viiveellä, ilman polkemista.

Kaasukahva

Käännä oikeanpuoleista kahvaa käyttääksesi apumootoria.

